



I VEGA



to wellness



La

ATP è un'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di apparecchi che impiegano le più innovative tecnologie oggi esistenti per il benessere.

La grande sofisticazione degli apparecchi ATP è dovuta in particolare agli accordi di collaborazione che Alberto Sanità, titolare di ATP e progettista degli apparecchi IVEGA, ha saputo stringere e sviluppare, nel corso degli anni, con strutture di ricerca e importanti aziende di progettazione in campo elettronico e di fisica applicata.

Le realizzazioni di ATP possono vantare caratteristiche assolutamente uniche nei settori dell'estetica professionale, della fisioterapia e della medicina estetica.

Ogni apparecchio di ATP è corredato, oltre che di manuali, anche di schede tecniche e di protocolli di lavoro, ma soprattutto gode dell'entusiasmo di centinaia di estetiste, di fisioterapisti e di medici che, ogni giorno, offrono risultati concreti e duraturi agli utenti.

RISTAGNO LIQUIDI




CELLULITE COMPATTA



DRENAGGIO VENO-LINFATICO



PELI SUPERFLUI

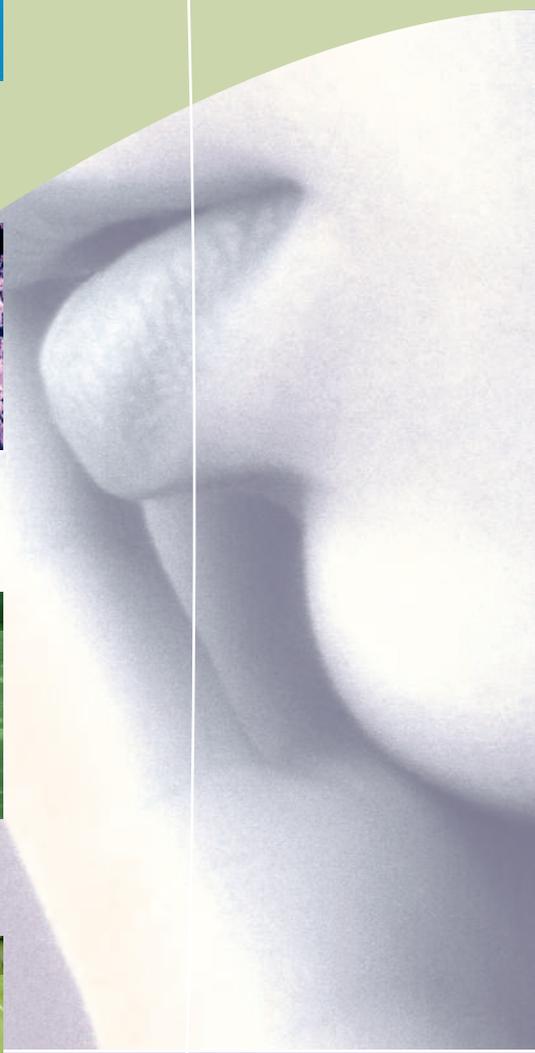




Stim Body Remodelling





- Rimodellamento corporeo elettronico
- Drenaggio tossine e cataboliti

- Cellulite, componente edematosa
- Rilassamento tessuti e muscoli

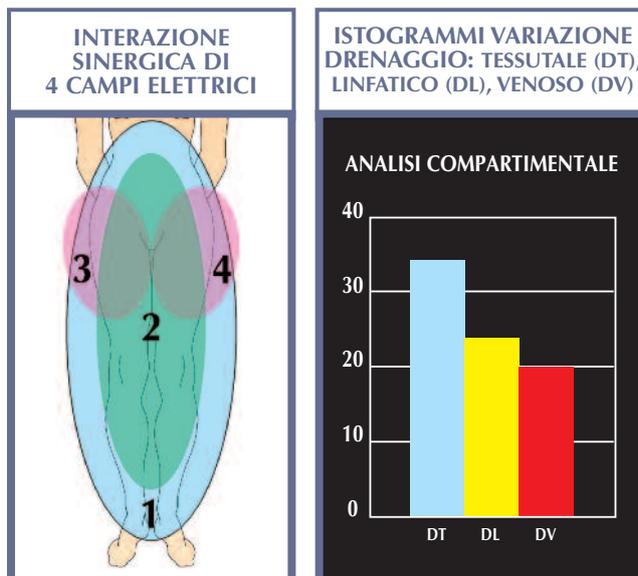

Lo STIMBODY REMODELLING è l'unico apparecchio di **rimodellamento corporeo elettronico** che impiega l'interazione sinergica di 4 campi elettrici, con schemi di applicazione estesa al corpo o di applicazione localizzata all'addome, gambe, seno o braccia.



Questo sistema raggiunge i massimi livelli di drenaggio fisiologico nei tessuti, **trascinandole molecole d'acqua, cataboliti e tossine.**


In contemporanea, la contrazione potenziata dei muscoli attiva lo svuotamento progressivo dei vasi linfatici e venosi, la tonificazione dei tessuti e il rassodamento muscolare.

AZIONE DETOSSINANTE





Ultra Dualsonic



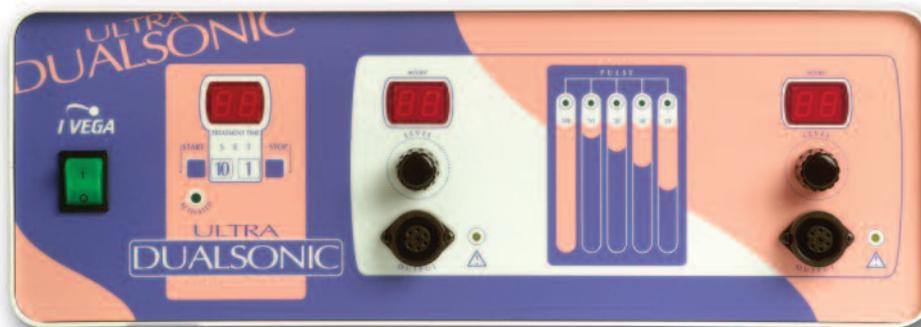


- Frammentazione micronoduli e macronoduli
- Trofismo tessutale

- Cellulite, componente sclerotizzata
- Adipe localizzata

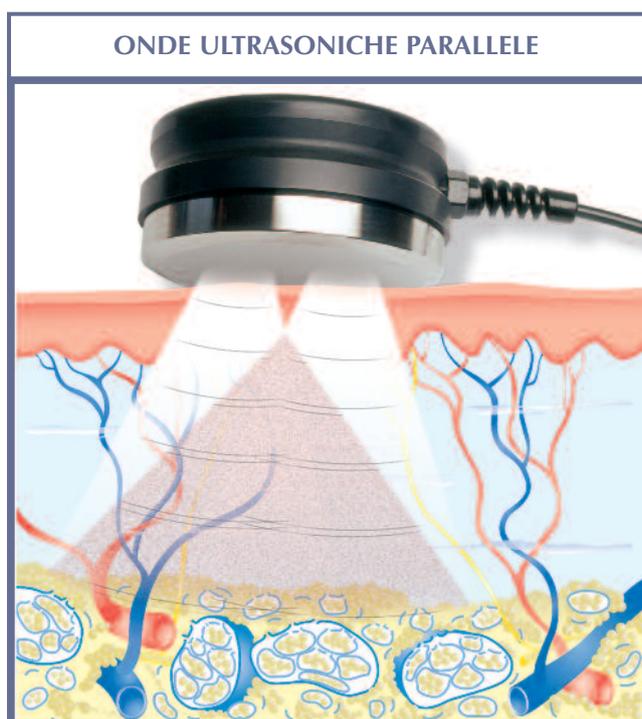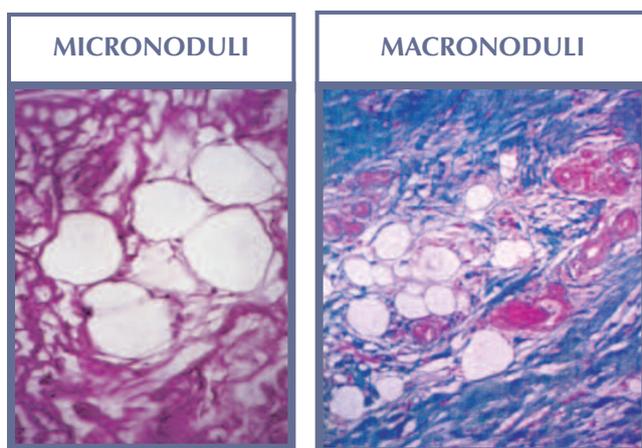

L'ULTRA DUALSONIC è l'unico apparecchio di ultrasuoni dualpower con emettitori di onde in assetto parallelo e multifrequenza d'investimento dei tessuti.

Questo sistema impiega due generatori con sintonia automatica che pilotano in successione due testine di uguale frequenza per i trattamenti localizzati e due manipoli di differente frequenza per i trattamenti dinamici della cellulite compatta, adipe e rilassamento. Le onde ultrasoniche parallele in sovrapposizione creano la massima compressione che frammenta le fibre connettivali sclerotizzate, "micronoduli e macronoduli", diminuendo il processo di fibrosi della cellulite. L'emissione pulsata dei generatori consente di impiegare sempre tutta la potenza in uscita, 3 watt, senza mai creare il surriscaldamento delle zone trattate.

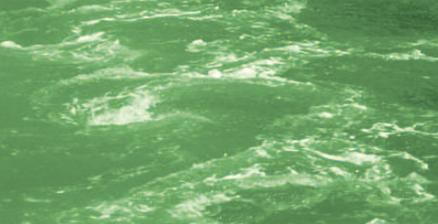


Presso Fludinamic





- *Drenaggio fisiologico e riduzione edemi*
- *Riattiva la circolazione linfatica e venosa*

- *Alterazioni rete linfatica*
- *Insufficienza venosa cronica*

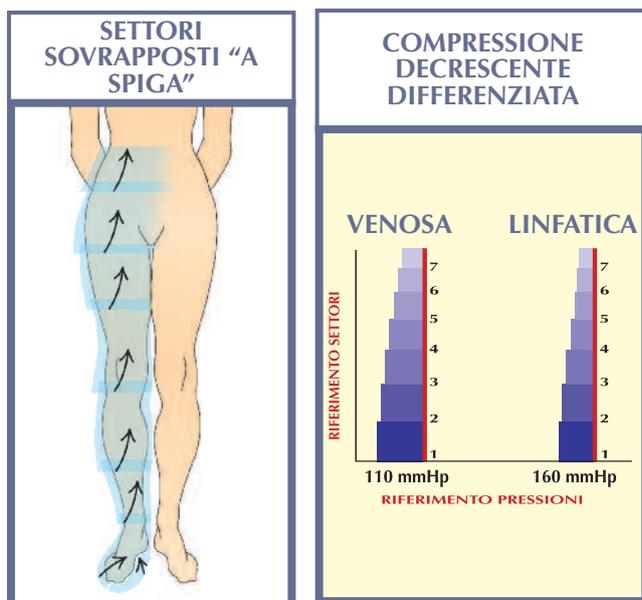

La PRESO FLUDINAMIC è l'unico apparecchio di **pressoterapia physio-digital** con programmazione isopressoria funzionale venosa e linfatica.

Questo sistema consente di impostare i valori di riferimento pressori o in base alla pressione sistolica effettiva del soggetto nel **trattamento della rete venosa** o in base alle pressioni fisiologiche di riferimento nel **drenaggio della rete linfatica**.

Le strutture della ventriera, dei gambali e delle pediere sono realizzate con la sovrapposizione dei settori "a spiga" come quelli utilizzati in campo angiologico, in più, particolari accorgimenti tecnici aumentano il drenaggio delle pompe plantari e delle stazioni inguinali.

La pressione dei singoli settori è monitorata costantemente, mentre la variazione decrescente della pressione consente di ottimizzare la spinta fluido dinamica senza arrecare fastidio soprattutto nella zona addominale.

COMPRESIONE FISIOLGICA



Diaterm rf30





- *Diatermoepilazione permanente*
- *Microcoagulazione micropulsata*

- *Peli superflui e ipertricosi*
- *Irsutismo*

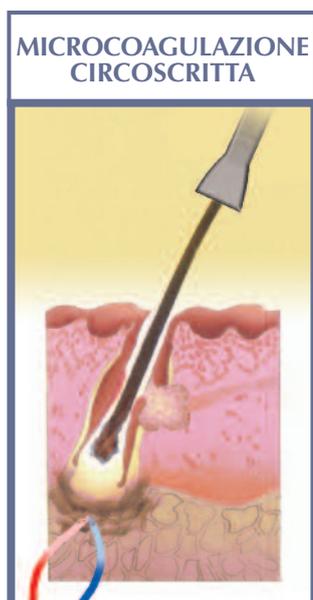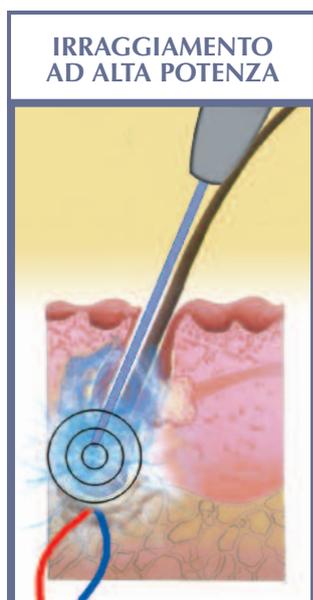

Il DIATERM RF30 è l'unico apparecchio di **epilazione diatermica micropulsata** con irraggiamento ad alta potenza.

Questo sistema consente l'epilazione definitiva, anche dei peli chiari o bianchi, attraverso fasi di interventi diatermici che producono nel tempo **risultati di non ricrescita dei peli trattati**.

La programmazione combinata tra alta potenza di erogazione e tempo di emissione micropulsato, produce tramite l'elettrodo monopolare ad ago, microcoagulazioni dermo-estetiche efficaci e circoscritte, che investono in modo controllato la zona papillare del bulbo pilifero.



EPI LA ZIONE DEFINITIVA

12 PROGRAMMI RIMODELLAMENTO

- L11** DRENAGGIO VASALE
- L12** CATABOLITI TOSSINE
- L13** DRENAGGIO TESSUTALE
- L14** CATABOLITI TOSSINE
- L15** CELLULITE
- L16** SECONDO STADIO
- L17** TONIFICAZIONE
- L18** CELLULITE
- L19** TERZO STADIO
- L20** RASSODAMENTO
- L21** CELLULITE
- L22** QUARTO STADIO

18 PROGRAMMI ELETTROSTIMOLAZIONE

- C01** TONIFICAZIONE MUSCOLARE E CELLULITE
- C02** SECONDO STADIO
- C03** TONIFICAZIONE TESSUTALE E MUSCOLARE
- C04** TONIFICAZIONE TESSUTALE E MUSCOLARE
- C05** RASSODAMENTO MUSCOLARE E CELLULITE
- C06** TERZO STADIO
- C07** RASSODAMENTO TESSUTALE E MUSCOLARE
- C08** RASSODAMENTO TESSUTALE E MUSCOLARE
- C09** INCREMENTO POTENZA MUSCOLARE
- C10** INCREMENTO POTENZA MUSCOLARE
- C11** INCREMENTO CIRCOLAZIONE LINFATICA
- C12** INCREMENTO CIRCOLAZIONE LINFATICA
- C13** INCREMENTO METABOLISMO CELLULARE
- C14** INCREMENTO METABOLISMO CELLULARE
- C15** INCREMENTO CIRCOLAZIONE VENOSA
- C16** INCREMENTO CIRCOLAZIONE VENOSA
- C17** BASSA FREQUENZA 100 Hz
- C18** BASSA FREQUENZA 250 Hz

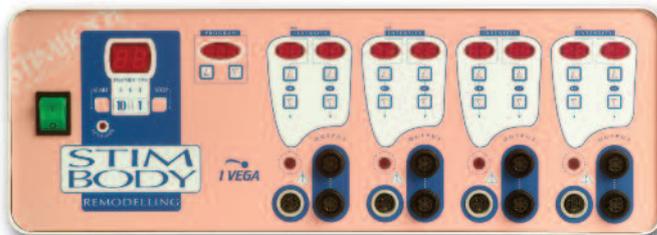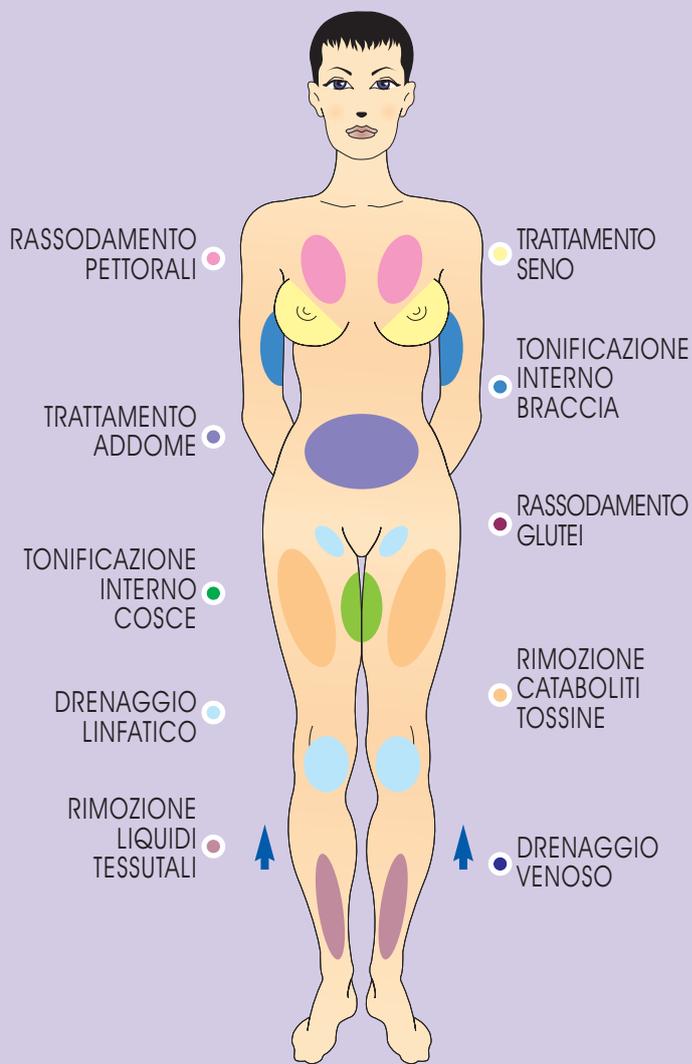

| | |
|----------------------------|------------------|
| PROGRAMMI DI TRATTAMENTO | (12+18) 30 |
| USCITE RIMODELLAMENTO | 4 |
| USCITE ELETTROSTIMOLAZIONE | 8 |
| ALIMENTAZIONE | 230 Vac - 50 Hz |
| CLASSE SICUREZZA ELETTRICA | I BF |
| DIMENSIONI APPARECCHIO | mm470Lx250Px170H |
| DIMENSIONI MOBILE | mm560Lx375Px900H |



Stim Body Remodelling

ONDE ULTRASONICHE
SOVRAPPOSTE CON MASSIMA
POTENZA DI COMPRESSIONE


FIBROLISI
frammentazione
delle fibre
connettivali
sclerotizzate,
diminuisce il
processo di fibrosi

RIDUCE
• micronoduli
• macronoduli


EFFETTO
TROFICO
vibrazione delle
strutture cellulari
ed intercellulari,
genera un
micromassaggio
profondo

ACCELLERA
• reazioni
biochimiche,
esaltando il
metabolismo
• rimozione dei
cataboliti e
riduzione
dell'edema


SONOFORESI
aumento della
permeabilità
cutanea,
favorisce una
maggiore
penetrazione di
sostanze attive
anticellulite

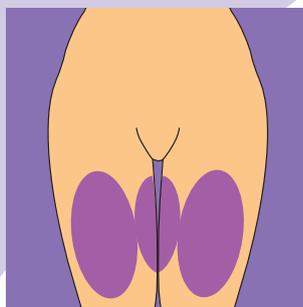

- COSCE
ZONE ANTERIORI
ED INTERNE

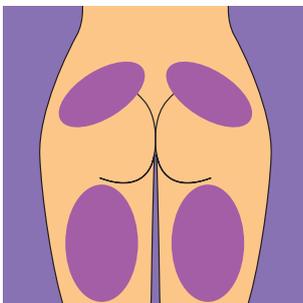

- GLUTEI
• COSCE
ZONE POSTERIORI

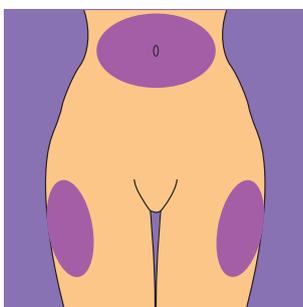

- ADDOME
• COSCE
ZONE ESTERNE
CULOTTES DE CHEVAL




| | |
|---|------------------|
| GENERATORI CON SINTONIA AUTOMATICA | 2 |
| TESTINE GRANDI AD EMISSIONE CONTROLLATA | 2 |
| MANIPOLI MEDI AD EMISSIONE CONTROLLATA | 2 |
| ALIMENTAZIONE | 230 Vac - 50 Hz |
| CLASSE SICUREZZA ELETTRICA | I BF |
| DIMENSIONI APPARECCHIO | mm470Lx250Px170H |
| DIMENSIONI MOBILE | mm560Lx375Px900H |

CE

Ultra Dualsonic

14 PROGRAMMI ISOPRESSORI

| | | | |
|----|----------------|-------------|-------------------------|
| 01 | FISIOVENOSO | 90/170 mmHg | pressione sanguigna |
| 02 | FISIOLINFATICO | A/G mmHg | pressione linfatica |
| 03 | VASOPRESS | A/G mmHg | pressione linfatica |
| 04 | LINFEDEMA | A/G mmHg | pressione linfatica |
| 05 | LINFADREN | A/G mmHg | pressione linfatica |
| 06 | ► 14 PROGRAMMI | 90/170 mmHg | pressioni differenziate |

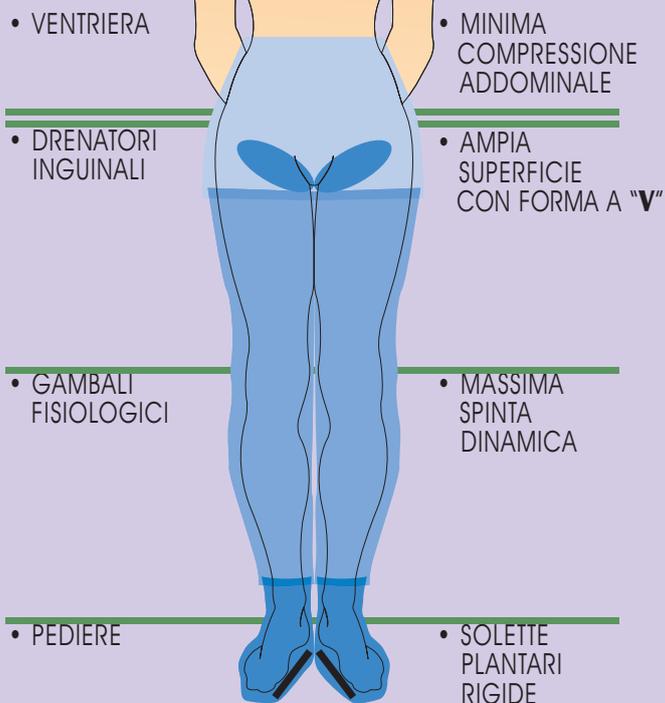

| | |
|----------------------------|------------------|
| SETTORI GONFIABILI | (7+2) 9 |
| PROGRAMMI DI TRATTAMENTO | (10+4) 14 |
| IMPOSTAZIONE | TEMPO/CICLI |
| ALIMENTAZIONE | 230 Vac - 50 Hz |
| CLASSE SICUREZZA ELETTRICA | I BF |
| DIMENSIONI APPARECCHIO | mm470Lx250Px170H |
| DIMENSIONI MOBILE | mm560Lx375Px900H |




Presso Fludinamic


DIATERMOEPILAZIONE PERMANENTE

| | POTENZA | TEMPO (1/100 SEC.) |
|------------------------|---------|--------------------|
| PELO SOTTILE | 2 | 30 |
| PELO VISO DA TRATTARE | 4 | 30 |
| PELO VISO TRATTATO | 6 | 30/40 |
| PELO INGUINE (NORMALE) | 7 | 30/40 |
| PELO GAMBA DA TRATTARE | 5 | 30/40 |
| PELO GROSSO | 8 | 30/40 |
| IRSUTISMO | 10 | 30/40 |


• ANAGEN

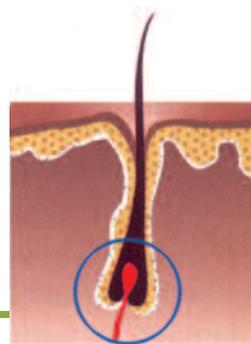

• CATAGEN

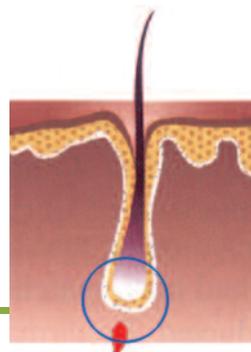

• TELOGEN

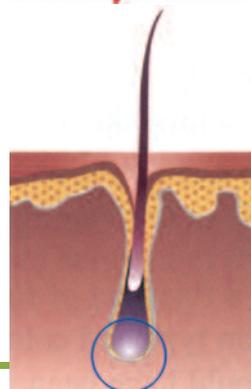

| | |
|----------------------------|------------------|
| EMISSIONE DIATERMICA | MICROPULSATA |
| FREQUENZA IN USCITA | 1,9 MHz |
| POTENZA IN USCITA | 30 W |
| ALIMENTAZIONE | 230 Vac - 50 Hz |
| CLASSE SICUREZZA ELETTRICA | I BF |
| DIMENSIONI APPARECCHIO | mm320Lx250Px115H |
| DIMENSIONI MOBILE | mm560Lx375Px900H |



Diaterm RF30



L'AZIENDA PRODUTTRICE È CERTIFICATA




IVEGA
BIOFISICA
APPLICATA

ATP Sanità Alberto
Via Tasso, 39
00185 Roma • Italy
Tel. e Fax +39 06 77200056
www.ivega.it • info@ivega.it